

付属品

ColorFlex® L2

HunterLabのアクセサリは、お客様の色測定機器の機能性と精度を高めるように設計されています。サンプル取り扱いツールから保護部品に至るまで、これらのアクセサリは、正確な測定結果とスムーズな操作を保証します。

同梱内容

数分で正確な色測定を行うために必要なものがすべて揃っています！



- ColorFlex L2 測定器・標準品ケース・診断用チェックタイル（緑色タイル）・測定器用標準品（白色タイル）
- 反射率測定用黒ガラス・ポートプレート 31.8 mm (1.25 インチ)・レンズ用クリーニングクロス・電源アダプター・クイックスタートガイド
- スタイラス（ホルダー付き）・クリーニングクロス・USBメモリ・リモートアクセスサポートのチラシ

オプションアクセサリ

ガラスサンプルカップ

64mm (2.5 インチ)

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用、光学的に透明なガラスカップ。

04-7209-00

リング&ディスクセット

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用ガラスカップに使用する。

02-4579-00



アクセサリー

オプションの付属品



サンプルカップ用不透明カバー

試料カップへの外部光の干渉を防ぐための遮光カバーです。

04-4000-00



ポートを開く

サンプルカップ用

このオープンポートインサートは、64 mm (2.5インチ) のサンプルカップを測定ポートの中心に位置合わせし、ガラス窓の底面にレンズの焦点を合わせるためのドロップダウンリップを備えています。

04-6622-00



オープンポートインサート

13 mm (0.5")

オープンポートインサートは、現場で交換可能なスナッピン式コンポーネントであり、25 mm の視野を、より小さい13 mm の直径に縮小します。

04-6623-05



オープンポートインサート

19 mm (0.75")

オープンポートインサートは、現場で交換可能なスナッピン式コンポーネントであり、機器の25 mm の視野を19 mm に縮小する、現場交換可能なスナッピン式コンポーネントです。

04-6623-08




オープンポートインサート

25 mm (1")

オープンポートインサートは、現場交換可能なスナッピン式の 25 mm (1 インチ) ポートインサートで、開放型であり、サンプルを装置の 25 mm 視野領域にマスクします。

04-6623-09

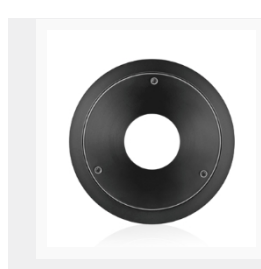


オープンポートインサート

25 mm (1") ガラス製

ポートインサートは、現場で交換可能なスナッピン式の25 mm (1インチ) 部品で、透明なホウケイ酸ガラス製です。サンプルを25 mm の観察領域に限定しつつ、装置を粒子から保護します。

02-6624-01

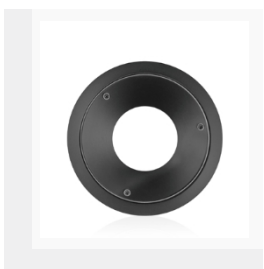

オープンポートインサート

32 mm (1.25") ガラス付き

ポートインサートは、ホウケイ酸ガラス製の、現場交換可能なスナッピン式の 32 mm (1.25") 部品で、サンプルを 32 mm の視野に限定し、粒子から装置を保護します。

02-6624-05

