



ColorFlex[®] EZ Coffee



計量

色

あなたの

目で見えるままに



ColorFlex[®] EZ Coffee 分光光度計

ColorFlex[®] EZ 製品ファミリーに新たに加わった ColorFlex[®] EZ Coffee は、挽いた焙煎コーヒーの色を測定するというお客様のニーズを満たすために特別に設計されています。


すべての ColorFlex[®] EZ Coffee には、60年にわたる色品質の管理の経験と革新が詰まっています。

使いやすい ColorFlex[®] EZ Coffee は、凍結乾燥顆粒やインスタントコーヒー粉末を含む、挽いた焙煎コーヒーの色を正確に測定するために特別に設計されています。この精度は、人間の目が見るままの色を測定することが実証されている唯一の測定技術である 45°/0° 光学幾何学を採用することで実現されています。ColorFlex[®] EZ Coffee は、ロット間の生産品質の一貫性を確保するために必要な測定データを提供します。

ファームウェアに用意されているコーヒーの色スケールには、以下のものがあります。

- ハンターラボ・コーヒーカラーインデックス (HCCI)
- SCAA番号
- SCAA焙煎度分類

コーヒーの色は、主に焙煎の度合いを評価するために用いられます。同じコーヒー豆であっても、焙煎度合いによって味の特徴が異なります。

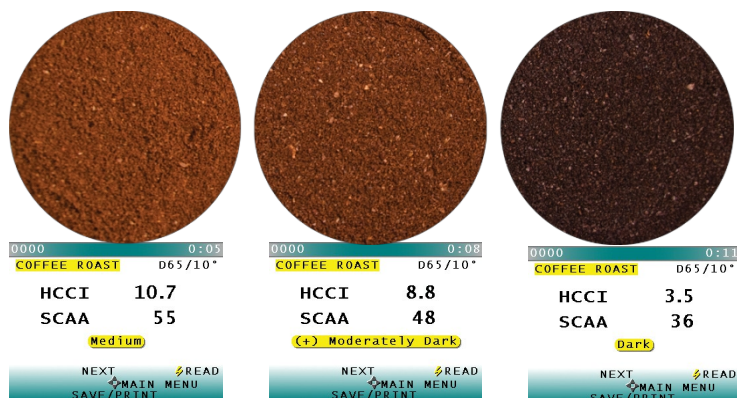

HunterLab ColorFlex[®] EZ Coffee を使用すれば、焙煎度を簡単に特定できます。



本バージョンの新機能：

ColorFlex®EZ Coffeeは、コーヒー専用の測定機能に加え、標準的なHunter L、a、b色度およびCIE L*a*b*色度・分光データ指標を用いて、液体、半固体、粉末、固体など、コーヒー以外の幅広い試料の反射色も測定可能です。

—液体、半固体、粉末、固体—の反射色を、標準的なHunter L、a、b色度およびCIE L*a*b*色度・分光データ指標を用いて測定できます。

すべての ColorFlex® EZ Coffee 装置は、すぐにコーヒーの色値測定を開始できるよう準備されており、以下のものが含まれています。

- 校正および診断用タイルの完全セット
- 性能認定用コーヒータイル
- プラスチック製コーヒーサンプル皿1スリーブ

... これらすべてを、業界最高水準のカスタマーサポートが支えています。

世界79カ国に戦略的に拠点を構えるHunterLabは、グローバル規模で現地での販売およびサポートを提供しています。

性能評価用コーヒータイル



HunterLab の強み

ColorFlex®EZ は、世界で最も信頼されている色品質のエキスパートである HunterLab の 60 年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。

あらゆる課題に対して最適なソリューションを提供するという比類なき評判を誇るハンターラボは、あらゆる色測定のニーズと予算に合わせて製品や技術をカスタマイズし、業界で最も幅広い色測定ソリューションを提供しています。

これほど簡単です！

それが ColorFlex® EZ



詳細については、www.hunterlab.com をご覧ください。

または、お近くのHunterLab担当者にお問い合わせください。

スマトラ



コロンビア産



ハワイ産



アフリカの平原



アクセサリ



04-7209-00

ガラス製サンプルカップ: 64 mm (2.5 in)

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用の光学透明ガラス製カップ。

02-4579-00


リングおよびディスクセット

固形分が少ない半透明の液体のサンプル展示用に、ガラス製サンプルカップで使います。

04-4000-00

サンプルカップ用不透明カバー

ライトトラップとして機能し、外部光がサンプルカップに干渉するのを防ぎます。

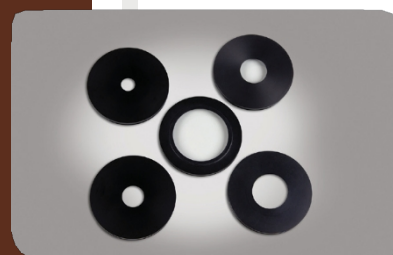

04-6622-00

サンプルカップ用ポートインサート

64 mm (2.5 in)ガラス製サンプルカップを確実に保持・位置決めし、粉末、顆粒、ペレット、ペースト、液体を正確に測定できるように設計されています。

04-6623-10

32 mm (1.25 インチ) ポートインサート

04-6623-09

25 mm (1 in) ポートインサート

04-6623-08

19 mm (0.75 インチ) ポートインサート

04-6623-05

13 mm (0.50 インチ) ポートインサート

これにより、
サンプル測定領域を調整できます。



A13-1014-294

USB フレキシブルキーボード

88 文字のキーボードにより、ユーザーは ColorFlex[®]EZ に ID を直接入力できます。

A13-1014-254

USB バーコードリーダー

バーコードスキャナは、サンプル識別のために製品 ID を ColorFlex[®]EZ に直接読み取ります。USB ポートで自動的に検出されます。

A13-1014-259

A13-1014-259USB プリンター

USB プリンターを使用すると、測定結果を紙に印刷できます。標準の USB ケーブル（別売）が必要です。サーマルプリンター用紙（別売）を使用します。



L02-1014-608

ハードケース、ColorFlex[®] EZ用

ColorFlex[®]EZ用ハードサイドキャリングケース。

ISO 9001 認証取得。認証機関: Hunter

Associates Laboratory Inc., 11491 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190-5280 電話 703.471.6870 • FAX 703.471.4237
• sales@hunterlab.com • www.hunterlab.com