



**ColorFlex<sup>®</sup>**

**EZ**



測定

カラー  
あなたの

目で見えるままに



対象

コーヒー

パウダー

顆粒

砂糖

ペレット

液体

洗剤

樹脂

顔料チップ

ラミネート

ソース

グラウト

スूप

スパイス

フィルム

セメント・  
コンクリート

ヨーグルト

ジュース

パネルおよび  
ブラーク

接着剤着色剤

すべての乾燥化学薬品

乳製品

ペイントパネル

フルーツ

チーズ

粉末  
コーティング

ナッツ

石鹸

固形物

## 顧客の目線で色を見る力

HunterLab の次世代 ColorFlex<sup>®</sup> EZ 分光光度計は、45°/0° 設計により、色測定の精度を究極のレベルに引き上げ、色の品質管理を最高水準へと導きます。

汎用性、簡便性、そして性能を兼ね備えた ColorFlex<sup>®</sup> EZ は、

### 60年以上にわたる色測定の革新

を、色品質分野で世界的に最も信頼されている専門家による、使いやすくコンパクトな1台の機器に凝縮しています。

## 45°/0°設計：色品質における絶え間ない完璧さを追求

HunterLabのColorFlex<sup>®</sup> EZは、45°/0°の設計を採用しており、色を正確に測定できるだけでなく、毎回完璧な結果が得られるという利点があります。これは、人間の目と同じように試料を測定する、最適かつ唯一の機器設計です。これにより、実験室だけでなく実環境においても、お客様が実際に見ているのと同じように、色を正確に、実験室だけでなく、実環境においても、顧客が実際に見ている通りの色を再現できます。

### 接続性の向上


3つのUSB 2.0通信ポートにより、さまざまなデバイスに接続できるオプションがさらに広がります：

- 結果を複数のマシンやコンピュータに転送するためのUSBフラッシュドライブ
- カスタムサンプルIDを手動で入力するためのキーボード
- データ入力ミスを防ぎ、迅速にサンプルを登録するためのバーコードスキャナー
- サンプル測定結果のハードコピーを即座に印刷するためのプリンター
- HunterLabのオプションソフトウェア「EasyMatch<sup>®</sup> QC」を使用してデータをプロットするためのコンピュータ

### さらにシンプルに

あらゆる色測定の課題に対応する、操作のしやすさ：

- コンパクトなサイズで、作業台上のスペースをほとんど必要としません
- 「ワンタッチ」操作

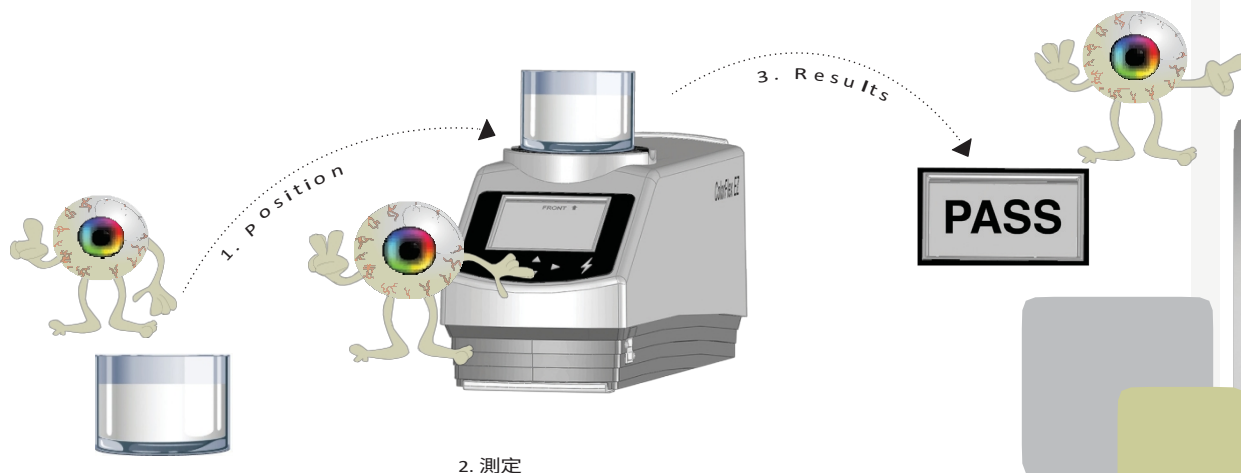

## さらなるパフォーマンス

パフォーマンスの向上とより良い成果を実現する多彩な機能：

- 不透明な固体、液体、粉末、顆粒、ペレットから、半透明の固体や液体に至るまで、あらゆるものを測定できる汎用性の高いサンプリング機能
- 設定や標準物質を機器間で簡単に転送できるほか、バックアップ用にUSBフラッシュドライブへのアップロードやダウンロードも可能

- **250件の測定設定を保存できる拡張されたサンプルストレージ、製品標準値および許容範囲**

および最大**2000件のサンプル測定データを保存可能**



## さらなる柔軟性

製品標準値および許容差を含む250種類のセットアップ構成に対応した内蔵ソフトウェアにより、以下のような幅広いパラメータに対応：

- 色スケール、屈折率、光源、観察者など、データ報告の条件を指定するためのパラメータ
- 色比較のための製品規格や目標値を特定するための標準値
- 製品仕様に照らして測定するための合格／不合格の許容範囲
- 不均一またはばらつきのある試料について正確な測定値を得るための平均化
- 測定データを、色データ、色差データ、スペクトル差データなど、測定データを多様な形式で報告するための表示形式
- 多彩なサンプル処理用アクセサリ

ColorFlex® EZ Tomatoもご用意しています


## HunterLabの優位性

ColorFlex®EZ は、世界で最も信頼されている色品質のエキスパートである HunterLab の 60 年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。

あらゆる課題に対して最適なソリューションを提供するという比類なき評判を誇る HunterLab は、あらゆる色測定のニーズと予算に合わせて製品や技術をカスタマイズし、業界で最も幅広い色測定ソリューションを提供しています。



これほど簡単です！

ColorFlex®EZ

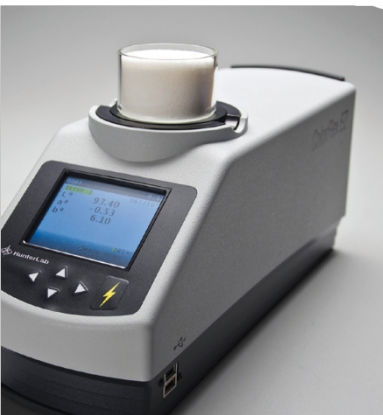

詳細については、[www.hunterlab.com](http://www.hunterlab.com) をご覧ください

、またはお近くのHunterLab担当者までお問い合わせください。

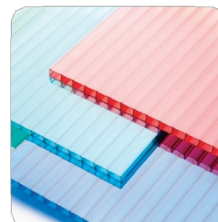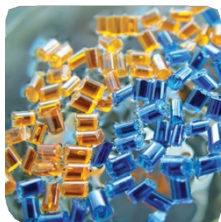

# 付属品



04-4000-00

## サンプルカップ用不透明カバー

サンプルカップへの外部光の干渉を防ぐための遮光カバーです。

04-7209-00

## ガラス製サンプルカップ：64 mm (2.5 in)

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用の光学的に透明なガラスカップです。

02-4579-00リングおよびディスクセット

## リングおよびディスクセット

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用ガラスサンプルカップで使します。



04-6622-00

## サンプルカップ用ポートインサート

64 mm (2.5 in)粉末、顆粒、ペレット、ペースト、および液体を正確に測定するために、ガラス製サンプルカップを確実に保持し、正確な位置に固定するように設計されています。

04-6623-10

32 mm (1.25 in) ポートインサート

04-6623-09

25 mm (1 in) ポートインサート

04-6623-08

19 mm (0.75 in) ポートインサート

04-6623-05

13 mm (0.50 インチ) ポートインサート

サンプル測定エリアを調整可能

サンプル測定領域を調整できます。



A13-1014-294

## USB フレキシブルキーボード

88 文字のキーボードにより、ユーザーは ColorFlex®EZ に ID を直接入力できます。

A13-1014-254

## USB バーコードリーダー

バーコードスキャナは、製品 ID を ColorFlex®EZ に直接読み取ります。USB ポートで自動的に検出されます。

A13-1014-259

## A13-1014-259USB プリンター

USB プリンターを使用すると、測定結果を紙に印刷できます。標準の USB ケーブル（別売）が必要です。サーマルプリンター用紙（別売）を使用します。



L02-1014-608

## ハードケース、ColorFlex® EZ用

ColorFlex®EZ用ハードサイドキャリングケース。

ISO 9001 認証取得。認証機関：Hunter

Associates Laboratory Inc., 11491 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190-5280 電話 703.471.6870 • FAX 703.471.4237  
\*sales@hunterlab.com • www.hunterlab.com