

コンパクト

・ パワフル

・ 高精度



ColorFlex[®] L2 Tomato

新しいColorFlex L2 トマト用分光光度計で、カラー判定の自信を
レベルアップさせましょう。

使いやすさは思いのまま、性能は必要なだけ。

これまでにないレベルの色彩精度とユーザー体験を実現します。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、設置スペースを最小限に抑えつつ、耐久性と信頼性を向上させています。品質管理プロセスを効率化・迅速化するために設計されたColorFlex L2 トマト用分光光度計は、ペースト／ピューレ、ソース、ケチャップ、ジュース

、生トマトなど、あらゆる加工形態のトマトの色を測定できるよう、専門的に開発されています。



次世代の

ColorFlex[®] ...L2 トマト

トマト向けNo.1の色測定ソリューション


HunterLab トマト基準標準: オリジナルのトマト色基準標準の策定者である
が提供する唯一の基準タイルは、製造中止となったBCRおよびUSDA基準に遡ることができ、
最も正確な赤色の測定を保証します。

必要なすべてのトマトスコアと指数

あらゆる形態のトマトを測定: トマトペーストスコア (TPS)、トマトソーススコア (TSS)、
トマトケチャップスコア (TCS)、トマトジューススコア (TJS)、a/b比、生トマト色指数 (FTCI)、
リコピン指数。

45°a:0° 環状照明光学系

優れた一貫性と色精度: 品質管理ワークフローの効率を高め、常に高品質な製品を提供します。

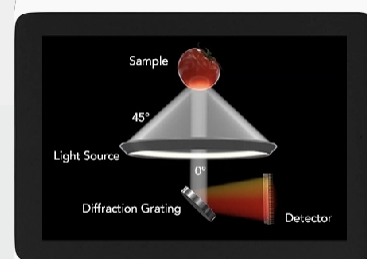

コンパクトで密閉型の防滴ケース

省スペースでメンテナンスも容易: 設置スペースを最小限に抑え、多忙な実験室環境の要求にも耐えるよう設計されています。



トマトペースト
トマト

トマトケチャップ

トマトソース

トマトスープ

トマトジュース



強力なスタンドアロン機能

コンピュータ不要: 大容量のオンボード処理能力とストレージを備えたColorFlex L2 Tomatoは、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続できます。



タッチスクリーン式カラーディスプレイを備えた、モダンでスマートなユーザーインターフェース


耐久性と効率性: 過酷な環境にも適した堅牢な工業用ガラス設計により、数秒で正確な色測定を可能にします
過酷な環境にも適しています。

新開発・改良されたカラーソフトウェア

Essentials 2.0: 次世代のユーザーフレンドリーな操作性により、数秒で正確かつ信頼性の高い色測定を行い、複数の三刺激値およびスペクトルデータセットをシームレスに分析できます。それほど強力なソフトウェアです。


直感的で分かりやすい初期セットアップ

時間の節約と使いやすさ: 箱から出してすぐに使用でき、迅速なトレーニングのためのウィザードが統合されているため、オペレーターの作業時間を短縮し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。

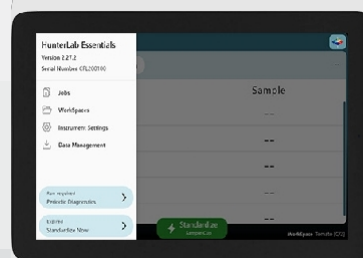

サンプル確認および画面録画用の内蔵カメラ

精度と通信機能: サンプルの位置決めを正確に行い、測定誤差を排除するとともに、記録データを簡単に共有
を可能にし、迅速な品質管理の意思決定を支援します。

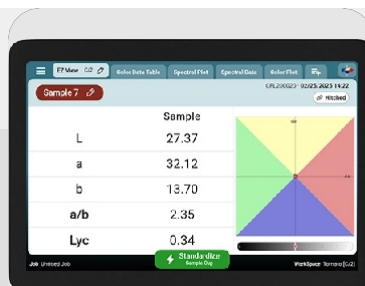

トマトペースト

トマト

トマトソース

トマトケチャップ

トマトジュース

トマトスープ

高度な診断機能を内蔵

オンボード診断ヘルスチェック: HunterLab ColorFlex L2 Tomato が常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、ColorFlex シリーズ機器の伝説的な信頼性の歴史をさらに発展させます。

包括的なデータ通信オプション: イーサネットおよび USB ポートを備え、データのエクスポートや印刷が簡単に行えます。HDMI および追加の USB ポートにより、マウス、キーボード、その他のアクセサリを接続できます。

QCワークフローの簡素化: 製造拠点全体での傾向分析とワークフローの簡素化を支援します。

お問い合わせ

オフィスおよび流通センター



HunterLab

11491 Sunset Hills Road
Reston, VA 20190-5280
ウェブサイト: www.hunterlab.com Eメール: sales@hunterlab.com 電話: 703-471-6870
FAX: 703-471-4237



HunterLab Europe

クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター
Dr.-August-Einsele-Ring 15
82418 ムルナウ、ドイツ ウェブサイト: www.hunterlab.com メール: sales@hunterlab.de 電話: +49 8841 9464

欧州オフィス



本社

HunterLab アジア太平洋地域

Heng Su Kiang、APAC セールスマネージャー
28-2, Plaza KLTS
No. 99, Jalan Gombak Setapak
53000 クアラルンプール連邦直轄区 マレーシア
ウェブサイト: www.hunterlab.com

ハンターラボ アジア太平洋

レオ・チャン、地域マネージャー

Flat E, 13F Leahander Centre


28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New

Territories Hong Kongウェブサイト:

www.hunterlab.com

Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話:

+852-2406 1723

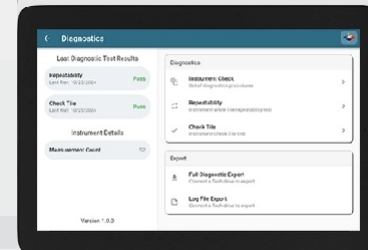

アジア太平洋地域のオフィス

詳細については、HunterLab（電話番号: 703-471-6870、Eメール: sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.com をご覧ください。

HunterLabは、HunterLabは、Hunter Laboratories Laboratory, Inc. の商標です。仕様は予告なく変更さ

れる場合があります。

ISO 17025 認定取得済み

ISO 9001 認定取得

CE 認定取得

09/25

