


コンパクト

・ パワフル

・ 高精度

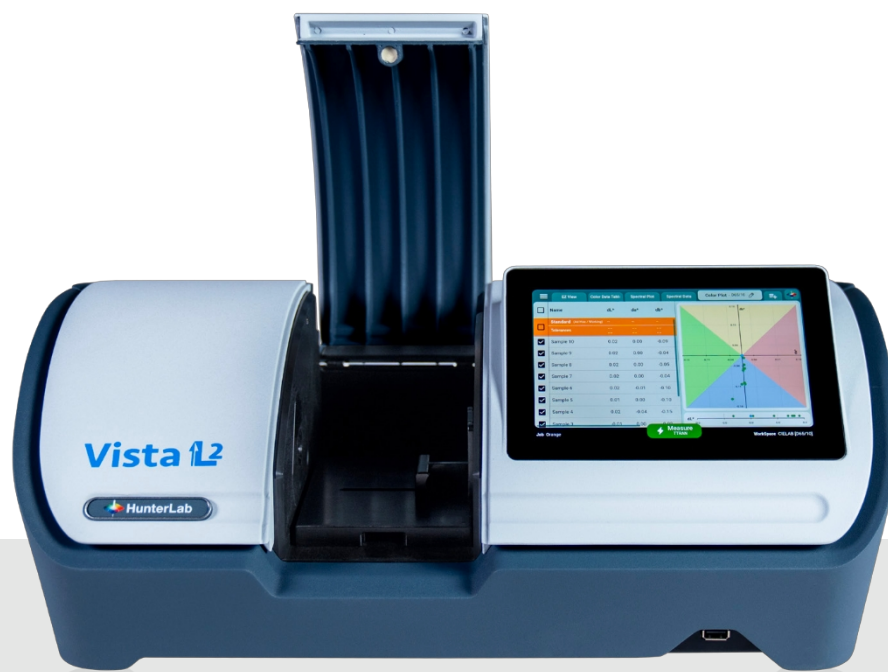

Vista[®] L2-ER

Vista L2-ER 分光光度計で、透明度と色に対する確信をさらに

高めましょう

使いやすさは思いのまま、性能はニーズに応えます。

Vista L2-ERは、色およびヘイズ／濁度の測定用透過型分光光度計であり、製薬、石油化学、バイオテクノロジー、食品、化学製造などの規制産業向けに設計されています。ロールベースのアクセス制御、監査証跡、電子署名、トレーサビリティのあるデータエクスポート機能を備え、FDA 21 CFR Part 11への準拠をサポートしています

Vista® L2-ER



Vista L2-ERは、各色測定値を、オペレーター、
機器のシリアル番号、校正・標準化情報、日時など）とともに各色測定値を
記録し、
結果をEasyMatch Essentials L2-ER内に保護された電子記録とし
て保存します。



以下の追加機能とメリットをすべてご覧ください。

ロックされ、再現可能な監査証跡



Vista L2-ERは、各測定結果を自動の日付・時刻スタンプ付きでロックされた監査証跡に記録し、検査員からの要求があればいつでも、それらの記録を
検査担当者の要求に応じて、人間が読み取れる形式および電子形式で再現することができます。

合格／不合格の判定、ユーザー好みの表示



各アナリストが確認したいデータビューを設定し、測定結果が仕様を満たしているか否かを、Vista L2-ER に判定させることができます。

アクセス制御とロックされた電子署名

認証されたユーザーのみがアクセスでき、その役割によって実行可能な操作が決まります。また、パスワード管理とロックされた電子署名により、各承認は特定の個人に紐付けられます。



バイオ・製薬用液体

食用油

水

透明プラスチックフィルム石油

飲料

白砂糖

化学製品

ベニバナ油

ショートニン
グ

オリーブオ
イル

透明プラスチックシート


コーラ／シロップ

フルーツジュ

プラスチック

すべての測定結果の完全なトレーサビリティ

結果ごとに、操作者、機器、校正、およびタイムスタンプの情報が記録されるため、別途ログを参照することなく、任意の数値がいつ、どのように生成されたかを追跡できます。

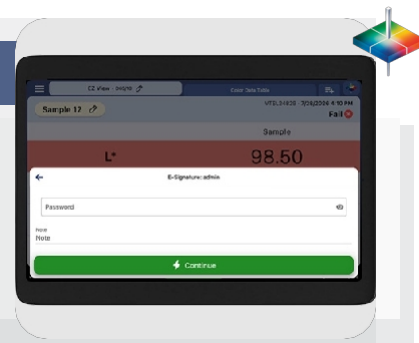


システムバリデーション文書が付属

Vista L2-ER には、印刷可能な PDF 形式の「バリデーションおよびコンプライアンス・ノートブック」が組み込まれています。HunterLab の ISO/IEC 17025 認定校正に裏打ちされたこのノートブックは、導入初日から FDA 21 CFR Part 11 への準拠をサポートする IQ、OQ、PQ の文書化に活用できます。




エンタープライズシステムへ連携する記録

記録はVista L2-ERからPDF、CSV、またはXLSX形式で出力され、利用可能なポートを経由してLIMS、SPC、MESへと転送されるため、数値を手作業で再入力することなく、結果をエンタープライズシステムに反映させることができます。

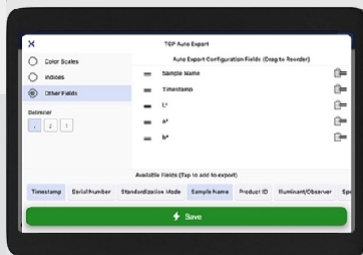


ローカルでの更新、またはネットワーク経由での一斉配信

Vista L2-ERは、USB経由、装置からのオンライン更新、またはEasyMatch Quality Centralを介したリモート更新が可能です。EasyMatch Quality Centralを使用すると、ネットワーク経由で接続されたすべての装置に更新ファイルをプッシュ配信できます。

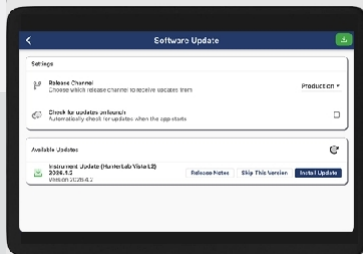

透明な液体洗剤

Vista L2-ERは、10 mm～50 mmのセルやバイアルを使用して絶対色値を測定し、必要に応じて5.25インチまたは1インチの光路長を自動的に報告するため、高価で洗浄が困難な専用セル

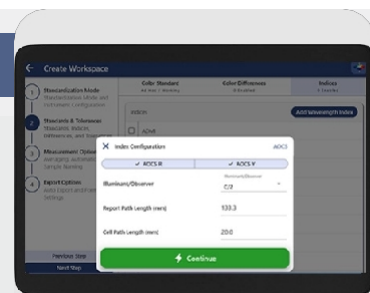

透明な液体洗剤

植物油

化学薬品

ココナッツオイル

食品用着色料

スポーツドリンク

食品

パーム油

機能性飲料

茶系飲料

柑橘類の果汁

時間の節約と使いやすさ：統合されたセットアップウィザードにより、迅速なトレーニングと即時の操作が可能となり、導入時間の短縮とオペレーターへの依存度の低減を実現します。

シームレスな接続性：USBポート、HDMI、および周辺機器のサポートを備えており、データのエクスポート、印刷、レポート作成、および既存のワークフローへの統合が容易です。

品質管理（QC）ワークフローの簡素化：製造拠点全体での傾向分析と一元的なデータ管理を可能にし、プロセス管理の向上を実現します。

オフィスおよび流通センター

HunterLab

11491 Sunset Hills Road Reston, VA
20190-5280
ウェブサイト：www.hunterlab.com メール：sales@hunterlab.com 電話：
703-471-6870
FAX：703-471-4237

本社

HunterLab Europe

クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター
Dr.-August-Einsele-Ring 15
82418 ムルナウ、ドイツウェブサイト：
www.hunterlab.com Eメール：
sales@hunterlab.de 電話：+49 8841
9464

欧州オフィス

HunterLab アジア・パシフィック

ヘン・ズー・キアン、APAC セールスマネージャー
28-2, Plaza KLTS
No. 99, Jalan Gombak Setapak
53000 クアラルンプール連邦直轄区 マレーシア
ウェブサイト：www.hunterlab.com
Eメール：sales-asiapacific@hunterlab.com

ハンターラボ アジア太平洋

レオ・チャン、地域マネージャー
リーハンダー・センター 13階 E号室
28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New Territories Hong Kongウェブサイト：
www.hunterlab.com
Eメール：sales-asiapacific@hunterlab.com 電話：
+852-2406 1723

詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、Eメール：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、hunterlab.com をご覧ください。



HunterLab Vista は、Hunter Associates Laboratory, Inc. の商標です。

ISO 17025 認定、ISO 9001 認定、



み

08/26

