


コンパクト
、パワフル
、高精度

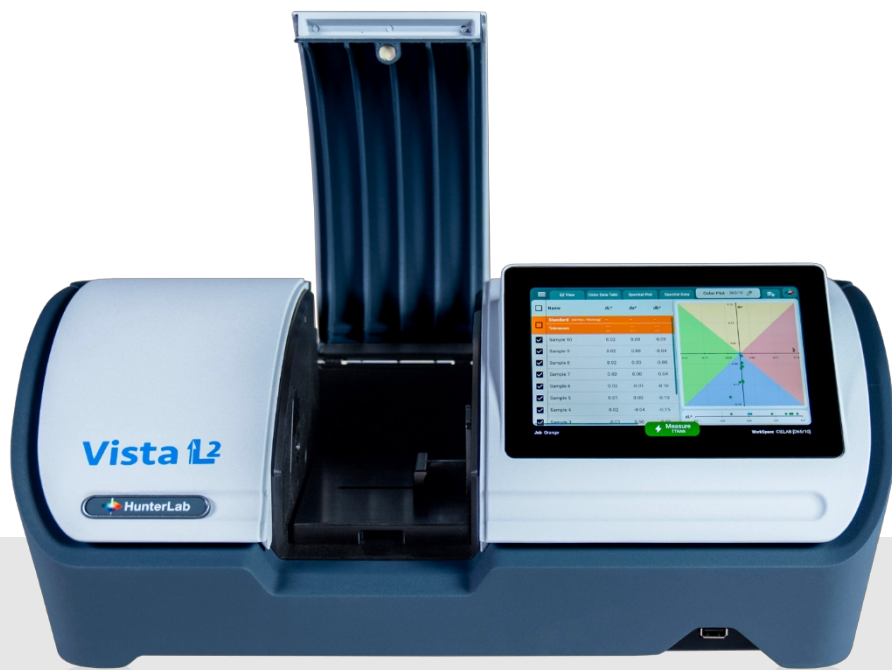

Vista[®] L2

Vista L2分光光度計で、透明度と色に対する確信をさらに高
めましょう

シンプルでありながら、必要なだけパワフル。

最新のスマートインターフェース、液漏れ防止のサンプルコンパートメント、内蔵のPC電源およびストレージにより、1ステップで色とヘイズを測定します。



次世代の Vista® ...L2

効率性を追求して設計された Vista L2 は、直感的な操作、低メンテナンス、コンパクトな設置面積を兼ね備え、ワークフローを簡素化し、コストを削減し、毎日安定したパフォーマンスを保証します。



以下の追加機能とメリットをすべてご覧ください。

PC 処理能力を内蔵


コンピュータは不要：数百万件の測定に十分な、オンボードの演算能力とストレージを備えた、完全に自立したカラーワークステーションとして機能します。測定、分析、データ保存、レポート作成に外部PCは必要ありません。

色とヘイズの同時測定

迅速な意思決定とワークフローの簡素化：透過色とヘイズの両方を 1 ステップで測定することで、効率が向上し、オペレーターのミスが減少し、品質管理（QC）および品質保証（QA）の成果が向上します。

幅広い色スケールと指標

柔軟性と規格への対応：Pt-Co/Hazen/APHA、ガードナー色度、ヘイズ率、オパレスセンス、Y 全透過率、セイボルト、吸光度、CIE スペクトルデータ、LOVIBOND®、AOCS、薬局方など、世界的な業界要件を満たす幅広い規格に対応しています。

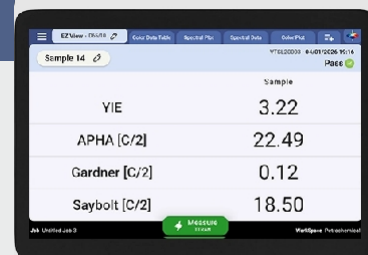

スピリ
ッツ

植物油

飲料

透明プラスチックシート

食品用着色料

白砂糖

コーラ・シロップ

水溶性

サフラワー油

食用油

フルーツジュ

透明プラスチックフィルム

ショートニン

グ

オリーブオ
イル

プラスチック


710 nmにおける高度なクロロフィル指数

品質に関する知見の向上：酸化や製品の安定性をより正確に評価できるため、食用油などの用途において、より長い保存期間と製品品質の向上を実現します。



柔軟な光路長測定

高精度かつコスト効率に優れる：標準的な透過率セルおよび10 mm～50 mmのビアルを使用し、絶対的な色度測定を実現するとともに、5.25インチまたは1インチの光路長を自動的に報告します。これにより、特に食用油や脂肪の分析において、高価で洗浄が困難な特殊セルの使用が不要になります。

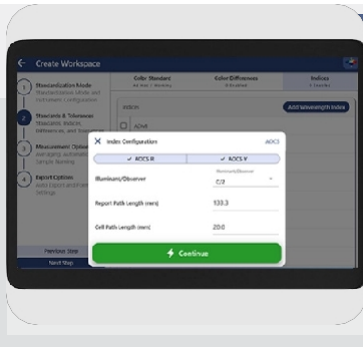


コンパクトで耐液性のある設計

生産環境向けに設計：設置面積が小さく、作業台のスペースを節約できるほか、耐液性のあるサンプルコンパートメントが内部部品を保護し、長期的な信頼性を確保します。




タッチスクリーンとカラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフェース

耐久性と効率性：直感的なインターフェースと、過酷な環境にも適した堅牢な工業用ガラス設計により、数分で正確な色分析を可能にします。過酷な環境にも適しています。

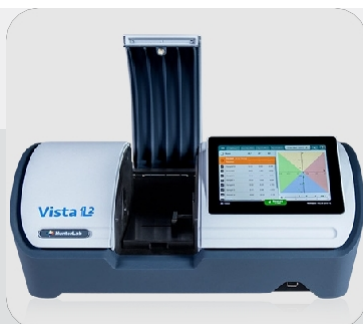

Essentials L2 ソフトウェアによる操作の簡素化

信頼性と使いやすさ：使い勝手を向上させ、重要な色データに素早くアクセスできるため、最小限のトレーニングで生産性と意思決定を改善します。

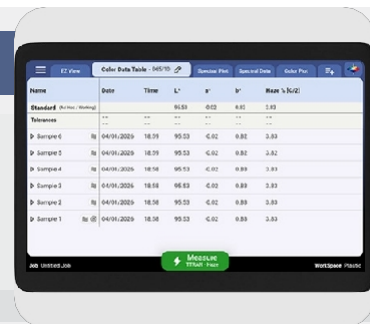

透明なプラスチックシート

透明な液体洗剤

化学薬品

ココナッツオイル

石油化学製品

スポーツドリンク

食品ス

パーム油

機能性飲料

ココナッツオイル

柑橘類のジュース

時間節約と使いやすさ：統合されたセットアップウィザードにより、迅速なトレーニングと即時の操作が可能になり、導入時間とオペレーターへの依存度を低減します。

シームレスな接続性：USB ポート、HDMI、および周辺機器のサポートにより、データのエクスポート、印刷、レポート作成、および既存のワークフローへの統合が容易です。

QCワークフローの簡素化：製造拠点全体での傾向分析と一元的なデータ管理を可能にし、プロセス管理を向上させます。

オフィスおよび流通センター

HunterLab

11491 Sunset Hills Road Reston, VA
20190-5280
ウェブサイト: www.hunterlab.com メール: sales@hunterlab.com 電話: 703-471-6870
FAX: 703-471-4237

本社

HunterLab Europe

クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター
Dr.-August-Einsele-Ring 15
82418 ドイツ、ムルナウウェブサイト: www.hunterlab.com Eメール: sales@hunterlab.de 電話: +49 8841 9464

ヨーロッパオフィス

HunterLab アジア・パシフィック

Heng Su Kiang, APAC セールスマネージャー
28-2, Plaza KLTS
No. 99, Jalan Gombak Setapak
53000 クアラルンプール連邦直轄区 マレーシア
ウェブサイト: www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com
電話: +(60) 340 324 749

ハンターラボ アジア・パシフィック

リーオ・チャン、地域マネージャー
Flat E, 13F Leahander Centre
28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New Territories Hong Kongウェブサイト: www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話: +852-2406 1723

アジア太平洋地域のオフィス

される場合があります。

