



Vista®

透過光の色とヘイズ測定において、全く新しい技術革新が実現しました。



私たちの
目に見える
色を
測定




The world's true measure of color

HunterLab

透過色とヘイズ測定における画期的な革新！

Vista®は、特徴豊富でコンパクトな可視光透過分光光度計で、透明または半透明のサンプルの色とヘイズを同時に測定できます。シンプルさ、精度、信頼性、そして手頃な価格を求めるユーザーのニーズに応えるよう設計されており、1回の簡単な測定で広範囲のサンプルの色とヘイズを測定できます。また、直感的で使いやすいインターフェースを提供します。

- コンパクトな設計で貴重な作業スペースを最小限に抑えます。
- 洗練された人間工学に基づくデザインはあらゆる研究施設の環境にも適しています。
- 測定プロセスを簡素化し、測定スループットと生産性を向上させるために設計された新しいモジュラーサンプルハンドリングシステム。

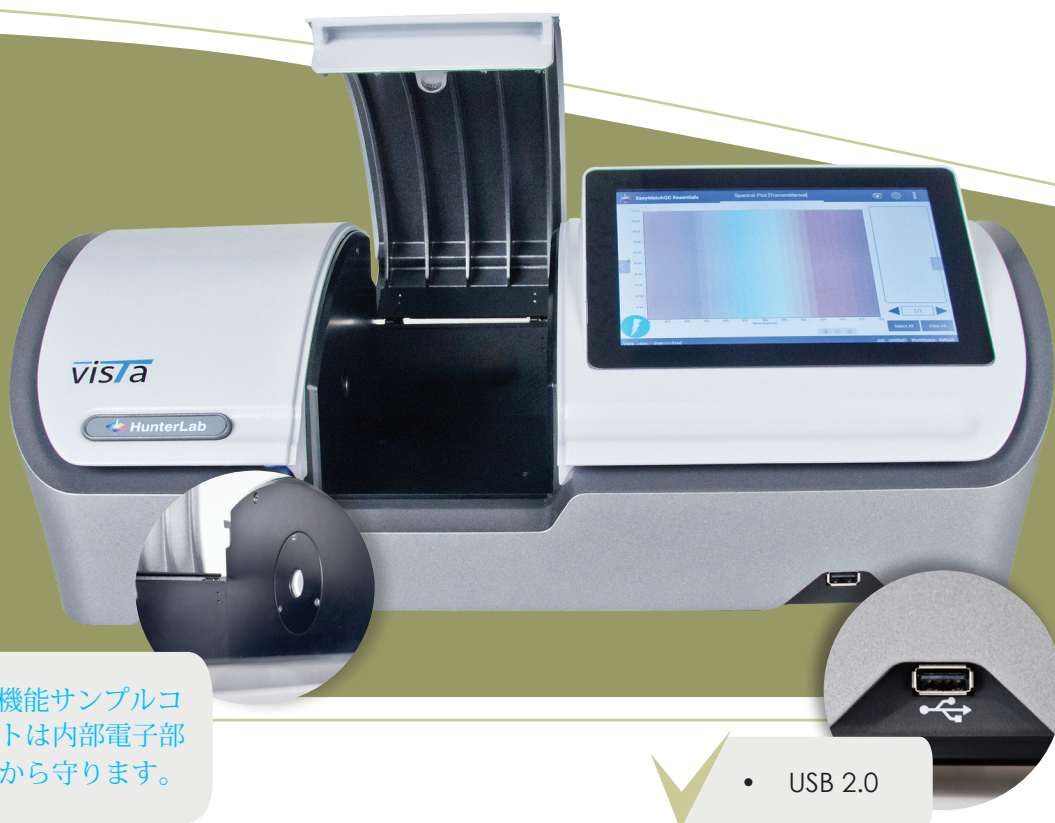

- 液漏れ保護機能サンプルコンパートメントは内部電子部品をダメージから守ります。

- USB 2.0


性能と信頼性

長寿命の全波長域LED照明と、業界最高水準の精度を兼ね備え、測色およびヘイズの測定において優れたパフォーマンスと精度を提供します。

お手頃な値段


より多くの機能をより低価格で提供。Vistaは初回投資、メンテナンスおよび補修費用が低く、最高の付加価値と最低の所有コストを提供します。

- 迅速
- 精密
- 費用効率
- 色およびヘイズの同時測定

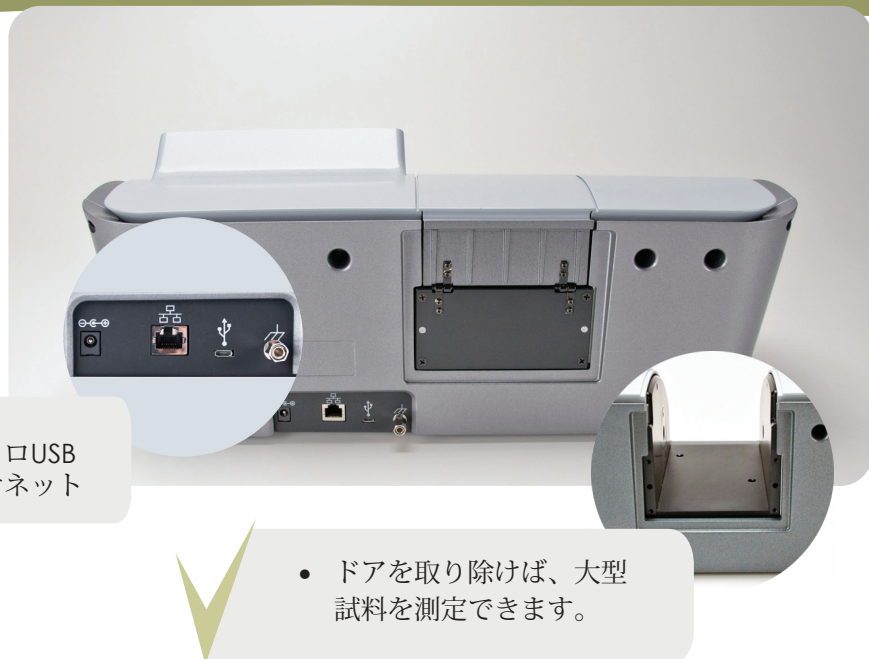

- マイクロUSB
- イーサネット

- ドアを取り除けば、大型試料を測定できます。

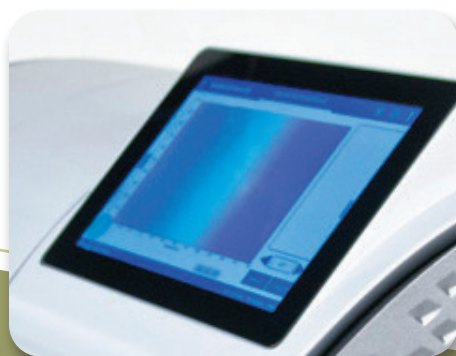


テクノロジー



- 色と濁度を一度の簡単なステップで同時に測定
- 製品の品質向上と製造工程の改善に必要なQCおよびQA指標を提供します。
- 色と濁度のワンタッチ標準化
- ユーザーの手順と貴重な時間を削減します。

画面

- 読みやすい7インチタッチスクリーンディスプレイ
- 直感的なメニュー駆動型インターフェースで、使いやすく、簡単に操作でき、少ないトレーニングで利用可能
- あらかじめ設定された多数の特殊用途用の作業スペースを選択できます。またユーザーニーズに基づいたカスタム作業スペースも作成いただけます。

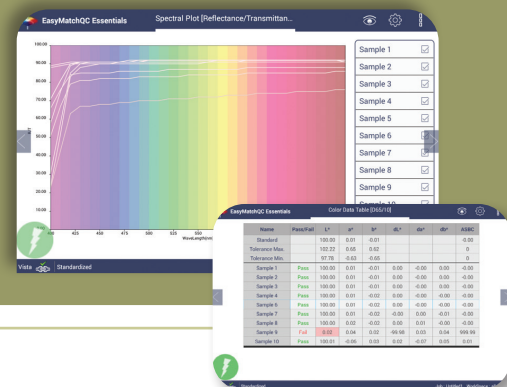

豊富な内蔵機能として、カスタマイズ可能な作業スペース、複数データ表示、最も頻繁に使用される透過色、ヘイズスケール、指数が用意されています。指標には以下が含まれます。Pt-Co/ハーゼン/APHA、ガードナー色指数、ヘイズ%、乳光度、Y全透過率、セイボルト、吸光度、CIE スペクトルデータ、主な3 薬局方: 米国、EU、日本。

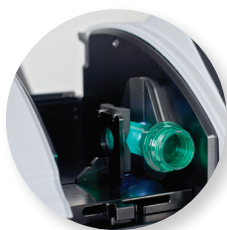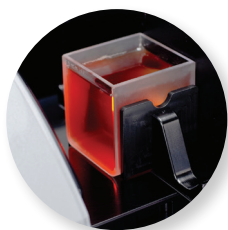

- Vistaは多種多様なサンプルの色とヘイズを同時に測定します。



アクセサリ

D02-1017-192

多機能サンプルホルダー

このホルダーは色と透過ヘイズを測定するために設計され、ASTM D1003 Procedure Bに準拠します。リバーシブルなデザインはサンプルを積分球または受光器に対して直接配置・保持することで全透過率と正透過率の測定を可能にします。フィルム、プラスチック、液体サンプルの測定精度と一貫性を確保します。このサンプルホルダーは他のオプションセルホルダーとアクセサリのベースとしてもご利用いただけます。

L02-1017-471

円形バイアルとプレフォームホルダー

このプレフォームホルダーは多機能サンプルホルダー(D02-1017-192)を必要とします。正確な透過色と測色を行うためにはプレフォームを垂直または水平にセットします。ヘイズ測定用のプレフォームではありません。

D02-1017-193

セルフセンタリングサンプルホルダー

セルフセンタリングサンプルホルダーは全透過と正透過測定用のセル配置を容易にし、毎回精度と正確さを確認します。シンプルなデザインにより適切な距離をとり、セルまたはサンプルを整列するため、セル間やユーザー間の不一致を取り除きます。

D02-1017-223

ユニバーサルアダプターベースプレート

このユニバーサルアダプターと（2個の）取り付けボルトアクセサリは第三者のサンプルホルダーを収容するように設計されています。寸法5"x3.75"(127mmx95.25mm)のベースプレートは、0.25"(6.35mm)のネジ穴が20個あり、1"x1"(25.4mmx25.4mm)のグリッド式間隔で配置されています。

D02-1017-344

ヘイズ測定用マクロセルホルダー

このセルホルダーは全透過とヘイズを繰り返し測定するためにマクロ分析セルを正確に保持するように設計されています。また、プラスチックセルを収容し、D02-1017-192 多機能サンプルホルダーを必要とします。このセルホルダーには3個のPMMAプラスチックセルがスターターキットとして含まれています。

D02-1017-390

ヘイズ測定用セミマクロホルダー

このセルホルダーは全透過とヘイズを繰り返し測定するためにセミマクロ分析セルの位置決めを行います。また、12.42 (光路長) x 12.50mm (0.489 x 0.492 インチ) 未満の外部の光路長用のセミマイクロプラスチックセル10mmを含み、多機能サンプルホルダー、D02-1017-192を必要とします。このセルホルダーには3個のPMMAプラスチックセルがスターターキットとして含まれています。

その他のアクセサリとサンプル取扱い付属品もご利用いただけます。

詳しい情報は: www.hunterlab.com/jpをご覧ください



本内容は通知されることなく変更することがあります。