



ColorFlex[®]

EZ



測定

カラー
あなたの

目で見えるままに



対象

コーヒー

パウダー

顆粒

砂糖

ペレット

液体

洗剤

樹脂

顔料チップ

ラミネート

ソース

グラウト

スूप

スパイス

フィルム

セメント・
コンクリート

ヨーグルト

ジュース

パネルと
ブラーク

接着剤着色剤

すべての乾燥化学薬品

乳製品

ペイントパネル果物

チーズ

粉末
コーティング

ナッツ

石鹸

固形物

お客様の目線で色を見る力

ハンターラボの次世代分光光度計「ColorFlex[®] EZ」は、45°/0°設計を採用し、色測定の精度を極限まで高め、色品質管理を最高レベルへと引き上げます。

汎用性、簡便性、そして高性能を兼ね備えたColorFlex[®] EZは、

60年以上にわたる色測定の革新

を、色品質において世界で最も信頼されている専門家による、使いやすくコンパクトな1台の機器に凝縮しています。

45°/0°設計：色品質における妥協なき完璧さを追求

HunterLab の ColorFlex[®] EZ は、45°/0° 設計の利点を活かし、色を正確に測定するだけでなく、毎回完璧な結果を得られることを保証します。これは、人間の目と同じようにサンプルを測定する、最適かつ唯一の機器設計です。これにより、実験室だけでなく実環境においても、お客様と同じ視点で色を正確に確認することができます。

、実験室内だけでなく、実環境においても、顧客が実際に目にする通りの色を確認できます。

接続性の向上


3つのUSB 2.0通信ポートを搭載し、さまざまなデバイスに接続できるため、用途が広がります：

- USBフラッシュドライブ：結果を複数のマシンやコンピュータに転送
- カスタムサンプルIDを手動で入力するためのキーボード
- データ入力ミスを防ぎ、迅速にサンプルを登録するためのバーコードスキャナー
- プリンター：サンプル測定結果を即座に紙媒体で出力
- HunterLabのオプションソフトウェア「EasyMatch[®] QC」を使用してデータをプロットするためのコンピュータ

さらにシンプルに

あらゆる色測定の課題に対応する、操作の簡単さ：

- コンパクトなサイズで、作業台上のスペースをほとんど必要としません
- 「ワンタッチ」操作

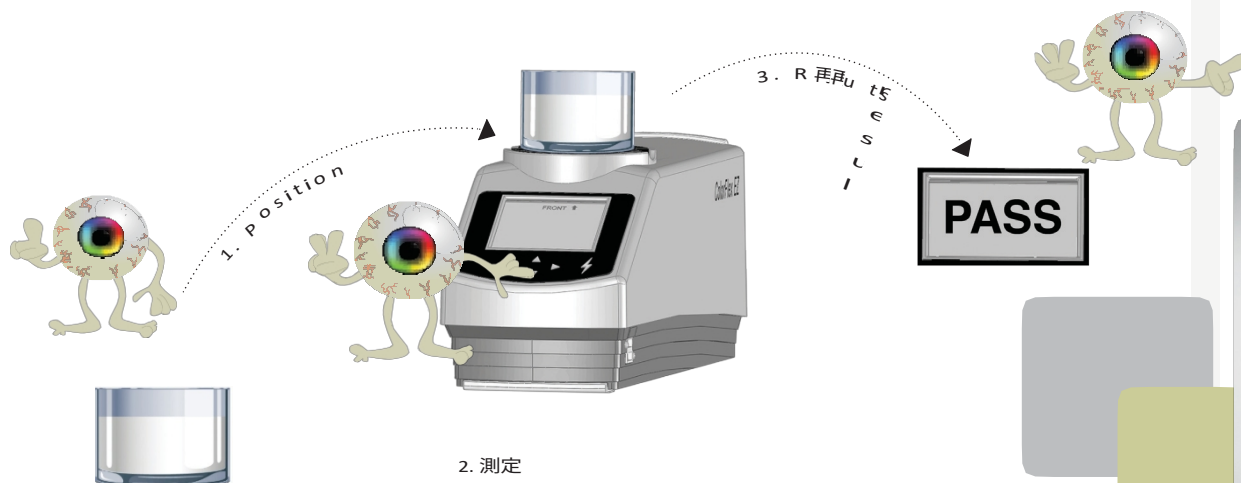

さらなるパフォーマンス

性能向上と成果向上のためのさらなる機能：

- 不透明な固体、液体、粉末、顆粒、ペレットから半透明な固体や液体まで、あらゆるものを測定できる汎用性の高いサンプリング機能
- 設定や標準物質を機器間で簡単に転送でき、バックアップ用にUSBフラッシュドライブへのアップロードやダウンロードも可能

- **250件の測定設定を保存可能な拡張されたサンプルストレージ、製品標準値および許容範囲**

および最大**2000件のサンプル測定データを保存可能**



さらなる柔軟性

製品標準値および許容差を含む250種類の設定構成を用いた組み込みソフトウェアで、以下のような幅広いパラメータに対応しています：

- データ報告の条件を指定するための色スケール、指標、光源、および観測者
- 色比較のための製品基準または目標値を特定するための標準値
- 製品仕様に対する適合／不適合を判定するための許容差
- 不均一または一貫性のないサンプルに対して正確な測定値を提供するための平均化
- 測定データを、色データ、色差データ、および分光差データなど、測定データを多角的に表示する機能
- 多彩なサンプル処理用アクセサリ

ColorFlex® EZ Tomatoもご用意しています


HunterLabの優位性

ColorFlex®EZ は、世界で最も信頼されている色品質のエキスパートである HunterLab の 60 年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。

あらゆる課題に対して最適なソリューションを提供するという比類なき評判を持つ HunterLab は、あらゆる色測定のニーズと予算に合わせて製品と技術をカスタマイズし、業界で最も幅広い色測定ソリューションを提供しています。

これほど簡単です！

それが ColorFlex®EZ で

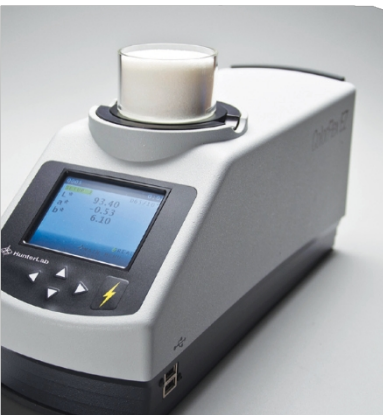

詳細については、www.hunterlab.com をご覧ください。

、またはお近くの HunterLab 代理店にお問い合わせください。



アクセサリ



04-4000-00

サンプルカップ用不透明カバー

サンプルカップへの外部光の干渉を防ぐための遮光カバーです。

04-7209-00

ガラス製サンプルカップ：64 mm (2.5インチ)

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用の光学的に透明なガラスカップ。

02-4579-00リングおよびディスクセット リングおよびディスクセット

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用ガラスサンプルカップで使用します。

04-6622-00

サンプルカップ用ポートインサート

64 mm (2.5 インチ)粉末、顆粒、ペレット、ペースト、および液体を正確に測定するために、ガラス製サンプルカップを確実に保持し、正確な位置に固定するように設計されています。



04-6623-10

32 mm (1.25 in) ポートインサート

04-6623-09

25 mm (1インチ) ポートインサート

04-6623-08

19 mm (0.75 インチ) ポートインサート

04-6623-05

13 mm (0.50 in) ポートインサート

サンプル測定エリアを調整可能

サンプル測定エリアを調整できます。

A13-1014-204

USB フレキシブルキーボード

88 キーのキーボードにより、ユーザーは ColorFlex®EZ に ID を直接入力できます。



A13-1014-254

USB バーコードリーダー

バーコードスキャナーは、製品IDを ColorFlex®EZ に直接読み取ります。USBポートに接続すると自動的に認識されます。

A13-1014-259

USBプリンター

USB プリンターを使用すると、測定結果をハードコピーとして印刷できます。標準の USB ケーブル (別売) が必要です。サーマルプリンタ用紙 (別売) を使用します。

A02-1014-608

ハードケース、ColorFlex® EZ用

ColorFlex®EZ用ハードサイドキャリングケース。



ISO 9001 認証取得。認証機関：Hunter

Associates Laboratory Inc.、11491 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190-5280 電話 703.471.6870 • FAX 703.471.4237
*sales@hunterlab.com • www.hunterlab.com