



ColorFlex®

EZ トマト



測定

色

あなたの

目に見えるまま



ColorFlex[®] EZ Tomato

ColorFlex[®] EZ 製品ファミリーの他の製品と同様、ColorFlex[®] EZ Tomato は、お客様の色測定のニーズを満たし、それを上回るよう特別に設計されています。

すべての ColorFlex[®] EZ Tomato には、60年にわたる HunterLab の色彩品質管理の経験と革新が詰まっています。

世界が認める真の色彩測定。

45°/0°の測定幾何学を採用した、使いやすいColorFlex[®] EZ Tomatoは、最高水準の色品質管理を実現します。

さらに重要なのは、

測定

色を
目

目で見ている通りの方法で

ColorFlex[®] EZ Tomatoは、ペーストやピューレ、ソース、ケチャップ、ジュースといったあらゆる加工形態のトマトの色、さらには生トマトの色を測定するために特別に設計されています。

ファームウェアに用意されているトマトの色評価尺度には、以下のものが含まれます：

- トマトペーストスコア (TPS) 、
- トマトソース
- スコア (TSS) 、
- トマトケチャップスコア (TCS)、
- トマトジューススコア (TJS)
- a/b比
- 生トマト色指数 (FTCI)


このバージョンの新機能 - リコピン指数

その他の重要な色尺度として、

ハンターL、a、b色度およびCIE L*a*b*色度など、その他の重要な色尺度もファームウェア内に用意されており、ColorFlex[®] EZ Tomatoを使用して、液体、半固体、粉末など、トマト以外の幅広いサンプルの反射色を測定することも可能です。

測定が可能になります。

など、幅広い非トマト試料の反射色を測定することも可能です。

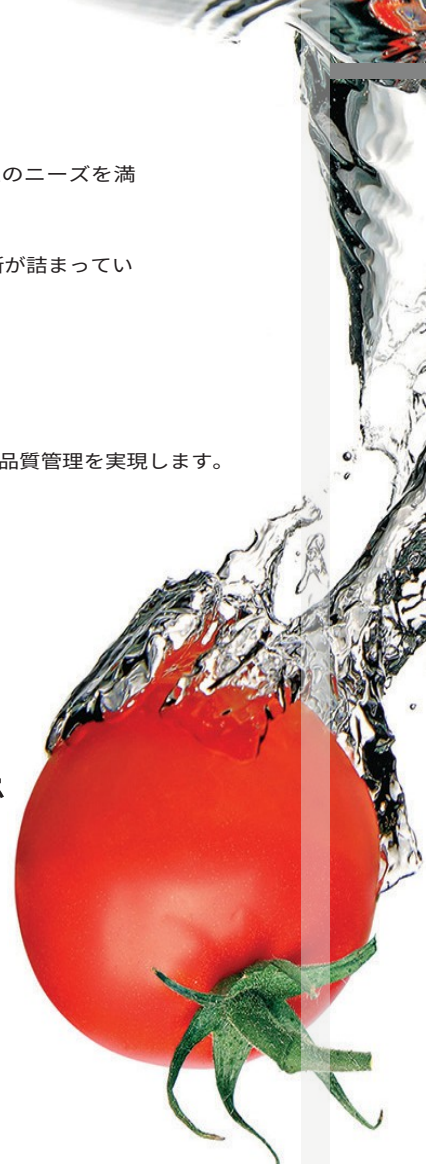

すべての ColorFlex® EZ と同様に、

ColorFlex® EZ Tomato

さらに多くの機能を提供します...

- ワンタッチでサンプルを読み取れる、**よりシンプルな操作**
- 3つのUSB 2.0ポートによる、**より高い接続性**
- 産業環境向けの密閉型光学設計による、**さらなる堅牢性**

- **さらに高い汎用性。** ColorFlex®EZ Tomatoには、250種類以上の標準設定が搭載されており、以下のよう
な多様なパラメータを設定可能です：

- 色度スケール、屈折率、光源および観測者測定条件の設定
- 標準値
- 合格/不合格の許容範囲
- 平均化 – ばらつきのある試料の測定精度を高めるため

オプションの特注防水キャリングケースの中には、トマトの色値をすぐに測定するために必要なものがすべて揃っています...

- ColorFlex®EZ Tomato測定器
- 校正・診断用タイル一式
- HunterLab トマト用タイル
- ガラス製サンプルカップ2個
- サンプルカップ用ポートインサート
- サンプルカップ用不透明カバー




HunterLab トマトタイル

... 業界最高水準のカスタマーサポート

、かつ米国農務省（USDA）の承認を取得しています。

詳細については、www.hunterlab.com をご覧ください

、またはお近くの HunterLab 代理店にお問い合わせください。

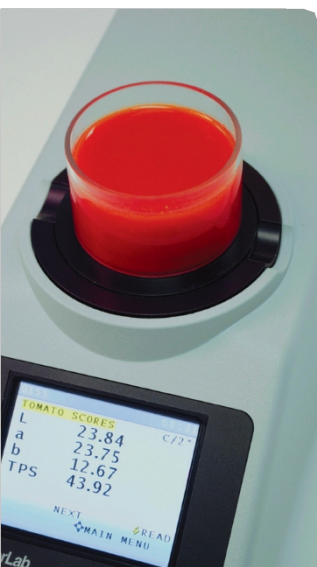



アクセサリ



04-4000-00

サンプルカップ用不透明カバー

サンプルカップへの外部光の干渉を防ぐための遮光カバーです。

04-7209-00

ガラス製サンプルカップ：64 mm (2.5 インチ)

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用の光学的に透明なガラスカップ。



04-6622-00 サンプルカップ用ポートインサート

サンプルカップ用ポートインサート

64 mm (2.5 インチ) サンプルカップを使用することで、粉末、顆粒、ペレット、ペースト、および液体の測定が可能になります。ポートインサートは、測定ポート上でサンプルカップを適切な位置に保持するように設計されています。

位置に保持するように設計されています。

04-6623-10

32 mm (1.25 インチ) ポートインサート



A13-1014-294

USB フレキシブルキーボード

88 文字のキーボードにより、ユーザーは ColorFlex[®] EZ Tomato に ID を直接入力できます。

A13-1014-254

USB バーコードリーダー

バーコードスキャナーは、製品IDを ColorFlex[®] EZ に直接読み取ります。USBポートに接続すると自動的に認識されます。

A13-1014-259

USBプリンター

USB プリンタを使用すると、測定結果を印刷できます。標準の USB ケーブル（別売）が必要です。サーマルプリンタ用紙（別売）を使用します。



L02-1014-608

ハードケース、ColorFlex[®] EZ Tomato

ColorFlex[®] EZ Tomato 用ハードケース。

ISO 9001 認証取得。認証機関：Hunter