


ColorFlex L2分光光度計は、最終製品の無駄を省き、持続可能性の目標に貢献し、ブランドイメージと収益を高めます。

次世代ColorFlexをぜひお試しください！



カラーフレックス

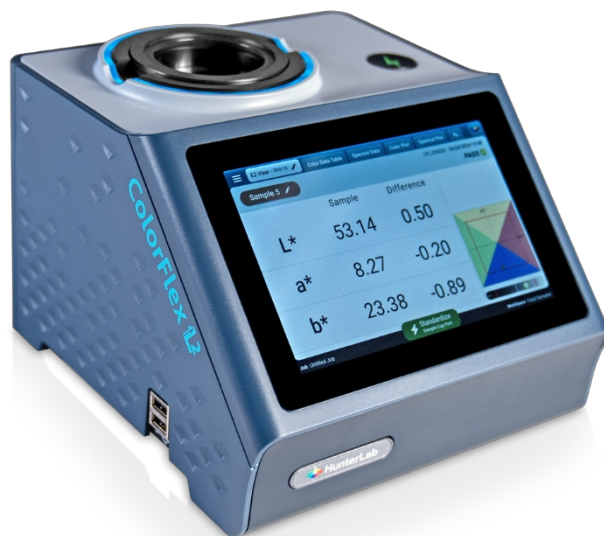

ColorFlex L2

NEWへ

旧型から

世界で最も信頼されている45°/0°分光光度計ColorFlex EZが、新しいColorFlex L2にアップグレードされました。より快適な操作性を提供します！

ColorFlex EZの規格とデータをColorFlex L2に簡単に移行できます。ColorFlex EZと同じキセノン光源と45°a:0°環状照明光学系により、旧機種から新機種へのシームレスな移行が可能です。

ColorFlex L2は、卓上スペースを必要としない小型サイズにもかかわらず、パワフルで、特定の色測定のニーズを満たすように

設計されています。

特長	メリット	CFEZ	CFL2
45°/0°環状照明光学形状	優れた色精度と一貫性により、効率的な品質管理ワークフローを実現。		
パワフルなスタンドアロン機能	コンピュータ不要：大容量のオンボード処理とストレージにより、ColorFlex L2は独立したカラーワークステーションとして機能します。独立したカラーワークステーションとして機能します。モニターはHDMI、キーボード、マウスを接続できます。		
直感的なスタートアップ機能	統合されたウィザードにより、すぐに導入でき、迅速なトレーニングでオペレーターの時間を節約します。ユーザーフレンドリー ColorFlex L2は、スタッフのトレーニングに関連する懸念を軽減する。削減します。		
新しくなったカラーソフトウェア	Essentials 2.0は、高度なカラーテクノロジー、信頼性の向上、使いやすさを提供し、必要なカラーデータを迅速に提供します。		
タッチスクリーンとカラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフェース	耐久性の高い工業用ガラスを使用し、過酷な環境にも対応。		
コンパクトなスタンドアローンと密閉型防滴ケース	最小限のスペースで、信頼性と耐久性に優れ、多忙なラボ環境にも対応。		
サンプル表示、画面録画用内蔵カメラ	正確なサンプルの位置決めにより、測定の一貫性を高めます。迅速な品質管理判断のために、簡単に記録を共有できます。		
高度なデータエクスポートと通信オプション	イーサネットとUSBポートを装備し、データのエクスポートと印刷が簡単に行えます。SPCシステムに接続して効率的なワークフローを実現し、時間とリソースを節約します。		
高度な診断機能を内蔵	オンボード診断ヘルスチェックにより、HunterLab ColorFlex L2は常に最高のパフォーマンスで動作し、ColorFlexファミリーの伝説的な信頼性の歴史を築き続けています。		
パルス状キセノン光源	高耐久性で信頼性の高い光源		

ハンターラボの強み

ColorFlex L2は、世界で最も信頼されている色品質の専門家であるHunterLabの70年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。比類のない評判で

HunterLabは、あらゆるカラー測定ニーズとご予算に対応する製品とテクノロジーを提供し、業界で最も幅広いカラー測定ソリューションを提供しています。

HunterLabの分光光度計は、カラー品質に必要な機能と精度を備えており、業界をリードするお客様から高い信頼を得ています。ColorFlex L2の詳細やデモのご予約は、<https://www.hunterlab.com/en/contact/>。

詳細については、ハンターラボ（703-471-6870、sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.comをご覧ください。

HunterLabおよびColorFlexiはHunter Associates Laboratory, Inc.の商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

ISO 17025認証、ISO 9001認証；

 認証取得

03/25